

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARTIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION  
(ISC)

---

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТАНДАРТ**

**ГОСТ  
8.617–  
2013**

---

Государственная система обеспечения единства измерений

**НЕДИСПЕРСИОННЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ (NDIR) АНАЛИЗАТОРЫ  
МОНООКСИДА УГЛЕРОДА В ГАЗОВОЙ ФАЗЕ СИГАРЕТНОГО ДЫМА**

**Методика поверки**

**Издание официальное**



Москва  
Стандартинформ  
2014

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, Техническим комитетом по стандартизации ТК 206 ПК 206.5 «Эталоны и поверочные схемы для средств измерений физико - химического состава и свойств веществ»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол № 58-П от 28 августа 2013 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Республик Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-стандарт
Российская Федерация	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Украина	UA	Минэкономразвития
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. № 1752-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 8.617–2013 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г.

## 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0–2012 (раздел 8).*

*Информация об изменениях к настоящим рекомендациям публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящих*

*рекомендаций соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии по стандартизации сети Интернет (gost.ru).*

© Стандартиформ, 2014

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Государственная система обеспечения единства измерений

НЕДИСПЕРСИОННЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ (NDIR) АНАЛИЗАТОРЫ МОНООКСИДА  
УГЛЕРОДА В ГАЗОВОЙ ФАЗЕ СИГАРЕТНОГО ДЫМА

## Методика поверки

State system for ensuring the traceability of measurements.

Nondispersive infrared (NDIR) gas analyzers for determination  
of carbon monoxide in the vapour phase of cigarette smoke.

The method of verification

Дата введения –2015–01–01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на недисперсионные инфракрасные (NDIR) анализаторы, предназначенные для измерения объемной доли монооксида углерода в газовой фазе сигаретного дыма (далее – анализаторы), и устанавливает методику их первичной и периодической поверок.

Настоящий стандарт распространяется на анализаторы<sup>1)</sup> со следующими метрологическими характеристиками:

- нижний предел измерений объемной доли монооксида углерода .....0,0%;
- верхний предел измерений объемной доли монооксида углерода..... 1,0 % - 20%;
- пределы допускаемой погрешности:
  - абсолютной, объемная доля, не менее .....± 0,010%,
  - относительной, не менее .....± 3%,

в зависимости от того, какая больше.

Интервал между поверками установлен при утверждении типа анализаторов<sup>2)</sup>.

## 2 Нормативные ссылки

<sup>1)</sup> В Российской Федерации требования к анализаторам установлены ГОСТ Р 51358—2008 «Сигареты. Определение содержания монооксида углерода в газовой фазе сигаретного дыма с помощью недисперсионного инфракрасного (NDIR) анализатора».

<sup>2)</sup> В Российской Федерации интервал между поверками анализаторов указан в свидетельстве об утверждении типа средств измерений. Для Украины интервал между поверками анализаторов может быть установлен также по результатам метрологической аттестации.

## ГОСТ 8.617–2013

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 2.601—2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ 2.610—2006 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов

ГОСТ 8.578—2008 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых средах<sup>1)</sup>

ГОСТ 12.1.005—88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.2.007.0—75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 9293—81 Азот газообразный и жидкий. Технические условия

ГОСТ 13045—81 Ротаметры. Общие технические условия

ГОСТ 13320—81 Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия

ГОСТ 28498—81 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с указанным всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

---

<sup>1)</sup> В Украине действует ДСТУ 3214–2003 «Метрология. Государственная поверочная схема для средств измерений концентрации компонентов в газовых средах».

### 3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **газовый канал анализатора:** Система конструктивных элементов анализатора, образующих пути прохождения газов.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ЭД – эксплуатационная документация;

ГС – газовая смесь;

ПО – программное обеспечение.

**Примечание** – К ЭД согласно настоящему стандарту относятся: руководство по эксплуатации, паспорт, формуляр по ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.610.

### 4 Операции поверки

4.1 При проведении первичной и периодической поверок выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта стандарта
1 Внешний осмотр	9.1
2 Опробование	9.2
3 Подтверждение соответствия ПО <sup>1)</sup>	9.3
4 Определение метрологических характеристик:	9.4
- определение погрешности	9.4.1
- определение вариации показаний <sup>2)</sup>	9.4.2
<sup>1)</sup> Операцию выполняют в том случае, если в нормативных правовых актах страны установлены требования по ее выполнению.	
<sup>2)</sup> Операцию выполняют в том случае, если в ЭД анализаторов указаны пределы допускаемой вариации показаний, установленные при утверждении типа средства измерения.	

4.2 Если при проведении любой операции поверки получен отрицательный результат, дальнейшую поверку прекращают.

## 5 Средства поверки

5.1 При проведении поверки применяют средства, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Средства поверки

Номер пункта стандарта	Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования и (или) метрологические характеристики (МХ) и основные технические характеристики средства поверки
9	Барометр-анероид М-67 по [1]. Цена деления: 1 мм рт. ст.
	Психрометр аспирационный М-34-М по [2] Диапазон измерений от 10 % до 100 %
	Термометр лабораторный ТЛ4 по ГОСТ 28498. Диапазон измерений от 0 °С до 50 °С. Цена деления: 0,1 °С.
	Вольтметр универсальный В7-58 по УШЯИ.411182.009. Диапазон измерений среднеквадратического значения переменного напряжения от 2 мВ до 700 В, пределы допускаемой основной относительной погрешности в диапазоне частот от 40 Гц до 10 кГц $\pm [0,6+0,1(U_k/U_x-1)]$ %, где $U_k$ – конечное значение установленного предела измерения напряжения, В; $U_x$ – значение измеряемой величины напряжения, В.
	Стандартные образцы состава газовых смесей монооксид углерода – азот в баллонах под давлением по [3]: ГСО 3816–87, ГСО 3819–87, ГСО 3827–87, ГСО 3831–87 <sup>1)</sup> . Метрологические характеристики приведены в таблице А.1 приложения А
9.4	Азот газообразный особой чистоты 1-го или 2-го сорта в баллоне под давлением по ГОСТ 9293
	Секундомер СОСпр по [4]. Пределы допускаемой абсолютной погрешности $\pm 0,2$ с
	Ротаметр типа РМ-А-х,ххГ УЗ <sup>2)</sup> по ГОСТ 13045, пределы допускаемой погрешности 4 % от верхнего предела измерения
	Редуктор баллонный кислородный одноступенчатый БКО-50-4 Трубка медицинская из поливинилхлорида, 6×1,5 мм
	Тройник из стекла или поливинилхлорида, диаметр условного прохода 6 мм



## Окончание таблицы 2

Номер пункта стандарта	Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования и (или) метрологические характеристики (МХ) и основные технические характеристики средства поверки
9.4	Вентиль точной регулировки ВТР-1 (или ВТР-1-М160). Диапазон рабочего давления от 0 до 150 кгс/см <sup>2</sup> , диаметр условного прохода 3 мм
<sup>1)</sup> Указаны утвержденные типы стандартных образцов, зарегистрированные в Государственном реестре утвержденных типов стандартных образцов Российской Федерации. <sup>2)</sup> х,хх – верхний предел измерений объемного расхода, м <sup>3</sup> /ч. При поверке анализаторов, не оснащенных встроенным или внешним побудителем расхода, используют ротаметр, обеспечивающий измерение расхода ГС на входе в анализатор с относительной погрешностью не более 30 %. При поверке анализаторов, оснащенных встроенным или внешним побудителем расхода, используют ротаметр, обеспечивающий измерение объемного расхода ГС от 0,10 дм <sup>3</sup> /мин.	

5.2 Допускается применение других средств, не приведенных в таблице 2, метрологические характеристики которых не хуже указанных в таблице 2.

5.3 Все средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке (аттестации), ГС в баллонах под давлением – действующие паспорта (сертификаты).

## 6 Требования безопасности и требования к квалификации поверителей

6.1 Помещение, в котором проводят поверку, должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

6.2 Концентрации вредных компонентов в воздухе рабочей зоны должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005.

6.3 При проведении поверки должны быть соблюдены правила безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 и [5].

6.4 К проведению поверки анализаторов допускают лиц, ознакомленных с ГОСТ 13320, ГОСТ 8.578 и ЭД анализаторов, имеющих квалификацию поверителя и прошедших инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

## 7 Условия поверки

7.1 При проведении поверки соблюдают следующие условия:

- температура окружающего воздуха 20 ± 5 °С;
- диапазон относительной влажности окружающего воздуха 30 % - 80 %;
- атмосферное давление (101,3 ± 4,0) кПа;



- относительное отклонение напряжения питания  
от номинального значения, не более  $\pm 5\%$ .

## **8 Подготовка к поверке**

8.1 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:

- подготавливают анализатор к работе в соответствии с требованиями ЭД на него;
- подготавливают к работе средства поверки в соответствии с требованиями ЭД

на них;

- проверяют наличие паспортов (сертификатов) и сроков годности ГС в баллонах под давлением;

- баллоны с ГС выдерживают в помещении, в котором проводят поверку, не менее 24 ч, поверяемый анализатор – согласно требованиям ЭД, но не менее 2 ч.

## **9 Проведение поверки**

### **9.1 Внешний осмотр**

При внешнем осмотре устанавливают соответствие анализатора следующим требованиям:

- отсутствие внешних повреждений, влияющих на работоспособность и безопасность;
- исправность органов управления;
- маркировка, соответствующая ЭД;
- четкость надписей на панелях.

Результаты внешнего осмотра считают положительными, если анализатор соответствует перечисленным требованиям.

### **9.2 Опробование**

Проверку общего функционирования анализатора проводят в процессе тестирования согласно ЭД.

Результаты опробования считают положительными, если все технические тесты анализатора завершены успешно.

### **9.3 Подтверждение соответствия ПО**

9.3.1 Подтверждение соответствия ПО анализаторов проводят путем проверки соответствия ПО анализаторов тому ПО анализаторов, которое было зафиксировано (вне-сено в банк данных) при утверждении типа анализаторов, и обеспечения защиты ПО от несанкционированного доступа во избежание искажений результатов измерений<sup>1)</sup>.

---

<sup>1)</sup> На территории Российской Федерации в соответствии с [6].

Примечание – Требования и методы проверки ПО установлены нормативными правовыми актами страны.

9.3.2 Для проверки соответствия ПО выполняют следующие операции:

- проводят визуализацию идентификационных данных ПО, установленного в анализатор, согласно ЭД (вывод на дисплей анализатора, распечатка протокола измерения и т.п.);

- сравнивают полученные данные с идентификационными данными, установленными при утверждении типа и указанными в ЭД.

9.3.3 Проверку обеспечения защиты ПО от несанкционированного доступа во избежание искажений результатов измерений выполняют согласно ЭД.

9.3.4 Результат подтверждения соответствия ПО анализаторов считают положительным, если идентификационные данные совпадают с установленными при утверждении типа и указанными в ЭД и выполнены требования ЭД в части защиты ПО от несанкционированного доступа.

#### 9.4 Определение метрологических характеристик

##### 9.4.1 Определение погрешности

##### 9.4.1.1 Собирают схему подачи ГС из баллонов под давлением:

- для анализаторов, не оснащенных встроенным или внешним побудителем расхода, согласно рисунку Б.1 приложения Б;

- для анализаторов, оснащенных встроенным или внешним побудителем расхода, согласно рисунку Б.2 приложения Б.

Способ подачи, расход и время подачи ГС на анализаторы выбирают согласно требованиям ЭД анализаторов.

9.4.1.2 Подают на вход анализаторов ГС в соответствии с таблицей А.1 приложения А в последовательности №№ 1–2–3 или №№ 1–2–3–2–1–3, если при поверке выполняют операцию по определению вариации показаний (см. таблицу 1).

ГС выбирают исходя из диапазона измерений анализаторов, установленного при утверждении типа и указанного в ЭД анализаторов (таблица А.1 приложения А).

Примечание – Если в ЭД анализатора указано несколько диапазонов измерений, но при эксплуатации используют меньшее количество диапазонов измерений, то по согласованию с владельцем анализатора допускается проводить поверку только по этим диапазонам измерений с обязательным указанием их в свидетельстве о поверке анализатора.

При подаче каждой ГС выполняют следующие операции:

- а) Открывают баллон с ГС, расход ГС в газовом канале анализатора устанавливают вентилем точной регулировки, контролируя по ротаметру, в соответствии с указаниями ЭД анализатора.

Для анализаторов, не оснащенных встроенным или внешним побудителем расхода, давление ГС в газовом канале анализатора устанавливают редуктором в соответствии с указаниями ЭД анализатора.

Для анализаторов, оснащенных встроенным или внешним побудителем расхода, расход ГС в линии сброса устанавливают не менее 0,10 дм<sup>3</sup>/мин для исключения попадания атмосферного воздуха в газовый канал анализатора.

б) Регистрируют установившиеся показания анализаторов, закрывают баллон с ГС.

Для анализаторов непрерывного действия время подачи ГС выбирают в соответствии с указаниями ЭД, но не менее утроенного предела допускаемого времени установления показаний по уровню 0,9 ( $T_{0,9ном}$ ), установленного при утверждении типа и указанного в ЭД анализаторов.

**П р и м е ч а н и е** – Допускается при поверке анализаторов, конструкция которых не предусматривает подключение баллонов с ГС, использовать пробоотборные мешки из комплекта анализаторов. Для подачи ГС на вход анализаторов выполняют следующие операции:

- проверяют герметичность пробоотборного мешка согласно ЭД анализаторов;
- проводят не менее трех циклов заполнения мешка ГС из баллона под давлением и вакуумирования;
- заполняют мешок ГС и подключают на вход анализатора согласно его ЭД.

#### 9.4.2 Определение вариации показаний

Определение вариации показаний анализаторов проводят одновременно с определением погрешности анализаторов по 9.4.1 для ГС № 2 (таблица А.1 приложения А) при подходе к ней со стороны меньших и больших значений объемной доли монооксида углерода.

### 10 Обработка результатов измерений

10.1 По результатам измерений объемной доли монооксида углерода, полученным в каждой точке поверки, рассчитывают значение абсолютной или относительной погрешности анализаторов, в зависимости от того, какая погрешность нормирована для данной точки поверки.

10.1.1 Рассчитывают значение объемной доли монооксида углерода (для всех ГС, кроме ГС № 1- см. табл. А.1)  $C_i$ , %, по формуле

$$C_i = P_i \cdot \frac{101,3}{P}, \quad (1)$$

где  $P_i$  – показание анализатора при подаче  $i$ -й ГС, объемная доля монооксида углерода, %;

$P$  – значение атмосферного давления при проведении поверки, кПа.

Примечание – расчет по формуле (1) проводят только в случае отсутствия у поверяемого анализатора автоматической компенсации изменения атмосферного давления, в противном случае принимают  $C_i = \Pi_i$ .

10.1.2 Значение абсолютной погрешности анализатора  $\Delta_i$ , %, при подаче  $i$ -й ГС рассчитывают по формуле

$$\Delta_i = C_i - C_i^A, \quad (2)$$

где  $C_i$  – измеренное значение объемной доли монооксида углерода при подаче  $i$ -й ГС, %;

$C_i^A$  – действительное значение объемной доли монооксида углерода в  $i$ -й ГС, указанное в паспорте, %.

10.1.3 Значение относительной погрешности анализатора  $\delta_i$ , %, при подаче  $i$ -й ГС (для всех ГС, кроме ГС № 1) рассчитывают по формуле

$$\delta_i = \frac{C_i - C_i^A}{C_i^A} 100 \quad (3)$$

10.1.4 Результаты определения погрешности анализатора считают положительными, если полученные значения погрешности во всех точках поверки не превышают пределов допускаемой погрешности, установленных при утверждении типа и указанных в ЭД анализаторов.

10.2 По результатам измерений объемной доли монооксида углерода, полученным при подаче ГС № 2 (см. табл. А.1), рассчитывают значение абсолютной или относительной вариации показаний анализаторов, в зависимости от того, какая погрешность нормирована для данной точки поверки.

10.2.1 Значение абсолютной вариации показаний анализатора  $v_A$ , %, рассчитывают по формуле

$$v_A = C_2^B - C_2^M, \quad (4)$$

где  $C_2^B, C_2^M$  – измеренное значение объемной доли монооксида углерода при подаче ГС № 2 при походе к точке поверки со стороны больших и меньших значений соответственно, %.

10.2.2 Значение относительной вариации показаний анализатора  $v_\delta$ , %, рассчитывают по формуле

$$v_\delta = \frac{C_2^B - C_2^M}{C_2^A} 100 \quad (5)$$

10.2.3 Результат определения вариации показаний считают положительным, если полученное значение вариации не превышает пределов допускаемой вариации показаний, установленных при утверждении типа и указанных в ЭД анализаторов.

## **11 Оформление результатов поверки**

11.1 При поверке ведут протокол, форма которого приведена в приложении В.

11.2 При положительных результатах поверки анализатор признают годным к применению и выписывают на него свидетельство о поверке<sup>1)</sup> установленной формы.

11.3 При отрицательных результатах поверки анализатор не допускают к применению и на него выдают извещение о непригодности<sup>1)</sup> установленной формы с указанием причин.

---

<sup>1)</sup> На территории Российской Федерации действуют [7].

**Приложение А**  
**(обязательное)**

**Метрологические характеристики газовых смесей,  
используемых при поверке анализаторов**

Таблица А.1 – Метрологические характеристики газовых смесей, используемых при поверке анализаторов


Диапазон измерений объемной доли монооксида углерода, %	Номинальное значение объемной доли монооксида углерода в ГС и пределы допускаемого абсолютного отклонения, %			Пределы допускаемой относительной погрешности, %	ГОСТ, ТУ, номер по реестру <sup>1)</sup>
	ГС №1	ГС №2	ГС №3		
от 0 до 1,0	азот				ГОСТ 9293
		0,50±0,05	0,90±0,05	$\pm (-1,5X+2,2)^{2)}$	ГСО 3816-87
от 0 до 2,0	азот				ГОСТ 9293
		1,00±0,10	1,80±0,10	$\pm (-0,4X+1,5)^{2)}$	ГСО 3819-87
от 0 до 3	азот				ГОСТ 9293
		1,50±0,25	2,75±0,25	$\pm 0,8$	ГСО 3827-87
от 0 до 5	азот				ГОСТ 9293
		2,50±0,25	4,75±0,25	$\pm 0,8$	ГСО 3827-87
от 0 до 10	азот				ГОСТ 9293
		5,0±0,5	9,5±0,5	$\pm 0,8$	ГСО 3831-87
от 0 до 20	азот				ГОСТ 9293
		10,0±0,5		$\pm 0,8$	ГСО 3831-87
			19,0±1,0	$(-0,04X+1,23)^{2)}$	ГСО 3834-87

<sup>1)</sup> Стандартные образцы состава газовых смесей монооксид углерода – азот в баллонах под давлением по [3].

<sup>2)</sup> X – аттестованное значение объемной доли монооксида углерода в ГС, указанное в паспорте, %.

**Приложение Б**  
**(рекомендуемое)**


**Схемы подачи газовых смесей на анализаторы при проведении поверки**

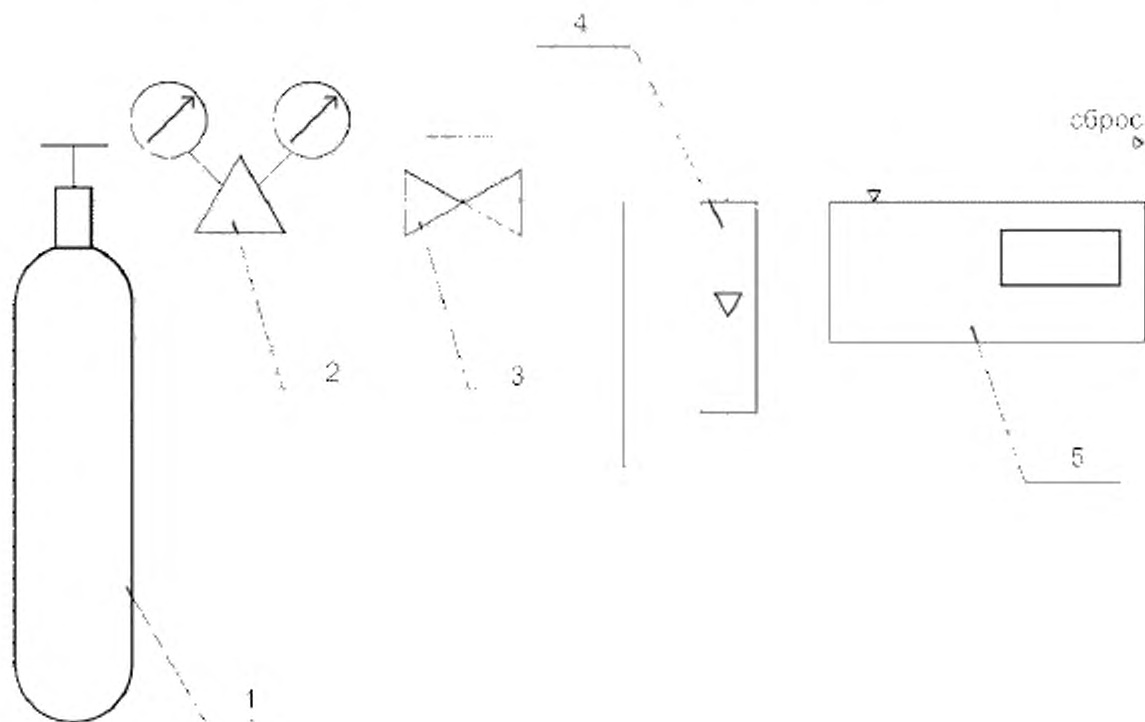

1 – баллон с ГС; 2 – редуктор баллонный; 3 – вентиль точной регулировки; 4 – ротаметр; 5 – анализатор

Рисунок Б.1 – Схема подачи ГС из баллонов под давлением на анализаторы,  
не оснащенные встроенным или внешним побудителем расхода



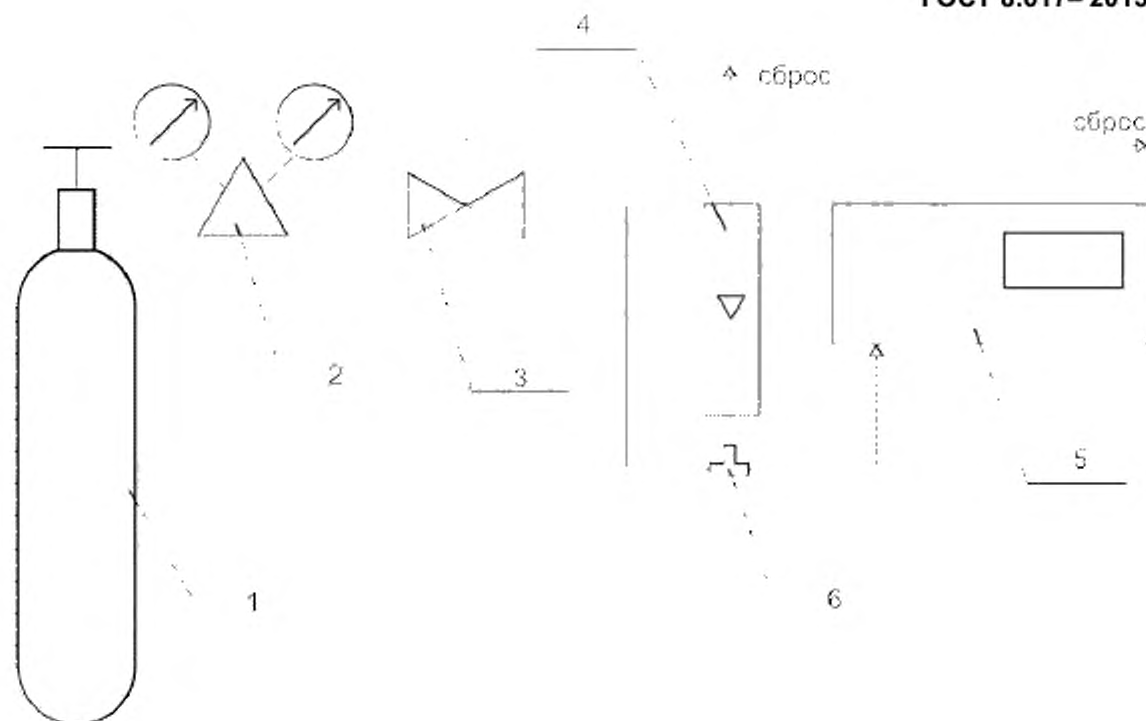

- 1 – баллон с ГС; 2 – редуктор баллонный; 3 – вентиль точной регулировки;  
4 – ротаметр; 5 – анализатор; 6 – тройник

Рисунок Б.2 – Схема подачи ГС из баллонов под давлением на анализаторы, оснащенные встроенным или внешним побудителем расхода

**Приложение В**  
**(рекомендуемое)**

**Форма протокола поверки анализаторов**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(тип СИ)

- 1) Заводской номер СИ \_\_\_\_\_
- 2) Принадлежит \_\_\_\_\_
- 3) Наименование изготовителя \_\_\_\_\_
- 4) Дата выпуска \_\_\_\_\_
- 5) Наименование нормативного документа по поверке \_\_\_\_\_
- 6) Наименование, обозначение, заводские номера применяемых средств поверки/ номера паспортов ГС \_\_\_\_\_
- 7) Вид поверки (первичная, периодическая)  
(нужное подчеркнуть)
- 8) Условия поверки:
- температура окружающей среды \_\_\_\_\_
  - относительная влажность окружающей среды \_\_\_\_\_
  - атмосферное давление \_\_\_\_\_
- 9) Результаты проведения поверки
- Внешний осмотр \_\_\_\_\_
- Опробование \_\_\_\_\_

Подтверждение соответствия программного обеспечения<sup>1)</sup>

Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения

## 3) Определение метрологических характеристик

## 3.1) Определение погрешности

Номер ГС (точка поверки)	Состав ГС	Действительное значение объемной доли монооксида углерода в ГС, $C_i^A$ , %	Показания анализатора $P_i$ , %	Значение погрешности, полученное при поверке	
				абсолютной	относительной
1	азот	0			—
2				—	
3				—	
2				—	
1	азот	0			—
3				—	

<sup>1)</sup> Приводят в случае если при поверке анализаторов была проведена операция по подтверждению соответствия ПО. Необходимые данные определяют в соответствии с требованиями ЭД анализаторов. Наименование и номер версии приводят обязательно.

Вывод: \_\_\_\_\_

Заключение \_\_\_\_\_, зав. № \_\_\_\_\_

(тип СИ)

соответствует (не соответствует) предъявляемым требованиям и признано годным  
(не годным) для эксплуатации.

Подпись поверителя \_\_\_\_\_

Выдано свидетельство о поверке \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

(Выдано извещение о непригодности \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_)

## Библиография

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| [1] ТУ 2504-1797–75              | Барометр-анероид контрольный М-67. Технические условия   |
| [2] ТУ 52-07- ГРПИ-405132-001–92 | Психометры аспирационные. Технические условия  |
| [3] ТУ 6-16-2956–92              | Смеси газовые поверочные – стандартные образцы состава. Технические условия  |
| [4] ТУ 25-1894.003–90            | Секундомеры механические. Технические условия  |
| [5] ПБ 03-576–03                 | Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением   |
| [6] Р 50.2.077–2011              | Государственная система обеспечения единства измерений. Испытания средств измерений в целях утверждения типа. Проверка обеспечения защиты программного обеспечения |
| [7] ПР 50.2.006–94               | Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок проведения поверки средств измерений   |

---

УДК 543.27.-8:006.354

МКС 17.020, 71.040.40

T88.5

Ключевые слова: недисперсионные инфракрасные анализаторы монооксида углерода; методика поверки; погрешность; вариация; метрологические характеристики

---

Подписано в печать 30.04.2014.      Формат 60x84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru)      [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)